



## CANLLAW DECHRAU CYFLYM

**Gofal Cwsmeriaid: 0800 093 1812**

*Os oes argyfwng cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neu ymateb meddygol brys.*

Mae'r System Monitro Glwcos yn y Gwaed AgaMatrix JAZZ yn caniatáu i chi wirio eich lefelau siwgr gyda gwaed cyflawn.

### Camau sylfaenol (i gael y cyfarwyddiadau llawn, edrychwch ar eich Canllaw Perchennog AgaMatrix JAZZ)

#### 1 Rhowch eich sribyn prawf yn y mesurydd:


Rhowch y sribyn prawf gyda'r bariau cyswllt at i fyny yn y porth sribyn prawf. Caiff y mesurydd ei gychwyn.

*GOFAL: I sicrhau canlyniadau cywir, golchwch eich dwylo gyda dŵr a sebon cynnes a'u sychu cyn bob prawf.*



#### 2 Man prawf i'w dorri:


Pwyswch y ddyfais dorri yn erbyn y man prawf a phwyswch y botwm rhyddhau.

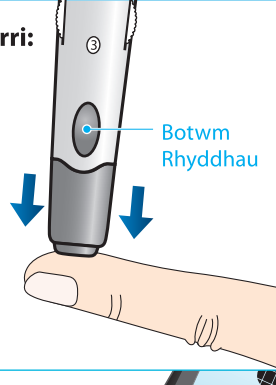

#### 3 Gwasgwch y diferyn gwaed:


Sychwch y diferyn cyntaf o waed sy'n ymddangos gan ddefnyddio hances bapur neu dywel papur.

Gwasgwch o waelod eich bys i fyny at y blaen, nes i ail ddiferyn bach o waed ffurfio.

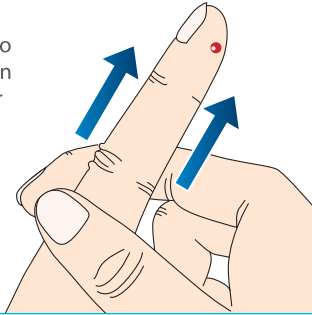

#### 4 Dewch â sribyn prawf at y sampl gwaed:


Mae'r Stribyn Prawf AgaMatrix JAZZ yn tynnu'r gwaed i'r sribyn prawf drwy fan y sampl.

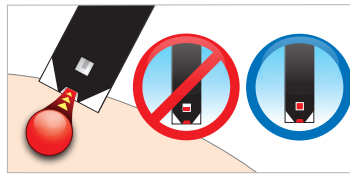

#### 5 Pan fydd y mesurydd yn bipio, tynnwch flaen y sribyn prawf o'r gwaed:



Wedi cyfrif i lawr 1-2-3 (bar sgrolio ar y sgrin) mae eich canlyniadau yn ymddangos.

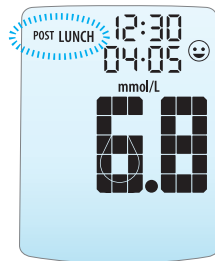


Bydd tag amser bwyd yn fflachio. I'w gadarnhau, pwyswch y botwm TIC. I'w newid neu am ragor o fanylion, gwelwch ganllaw'r perchennog.

#### 6 Gorffen:

Tynnwch y sribyn prawf sydd wedi'i ddefnyddio. Bydd y mesurydd yn cau. Tynnwch gap y ddyfais dorri a symudwch y gyllell meddyg. Gwardwch y sribyn prawf a'r gyllell meddyg a ddefnyddiwyd yn ddiogel




#### 1 Torrwch ben y ddyfais dorri.

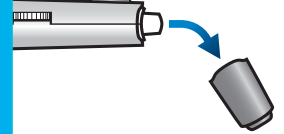


#### 2 Rhowch gyllell newydd yng nghwpan y daliwr cyllell meddyg.




#### 3 Tynnwch gap y gyllell meddyg i ffwrdd.

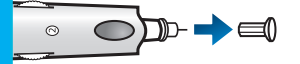

#### 4 Ail osodwch gap y ddyfais cyllell meddyg.

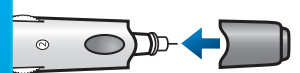

#### 5 Gosodwch lefel y torri.

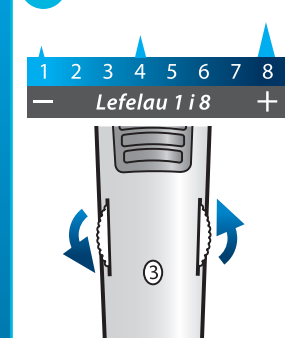

#### 6 Tynnwch yr handlen glicied allan nes i chi glywed sŵn clicio.



### Y Mesurydd Glwcos Gwaed AgaMatrix JAZZ

**Dangosydd**

**Botwm TICIO:** cadarnhau neu wneud dewis ar fwydlen

**Botwm Saeth I FNYN:** sgrolio yn ôl

**Porth Stribyn Prawf**



**Botwm GOLAU CEFNDIR:** CYNNAU a DIFFODD y golau cefndir


**Botwm Saeth I LAWR:** sgrolio ymlaen

### Stribyn Prawf AgaMatrix JAZZ

**Bariau Cyswllt:** Rhowch y pen hwn i mewn yn y porth stribyn prawf

**Ffenestr Lenwi Weledol:** yn llawn pan roir digon o sampl

**Man Sampl:** rhwch y gwaed neu'r toddiant rheolydd yma.

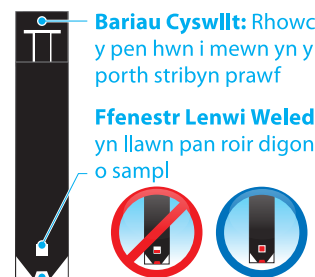


### System Cyllell Meddyg AgaMatrix

**Deial Addasu Dyfnder**

**Ffenestr Dangos Dyfnder**

**Cwpan Daliwr Cyllell Meddyg**

**Cap y Ddyfais Cyllell Meddyg**

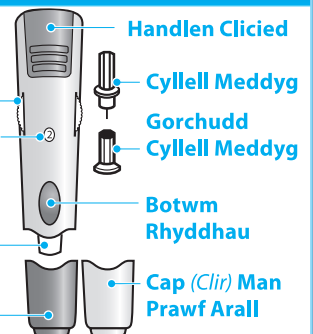

**Handlen Clicied**

**Cyllell Meddyg**

**Gorchudd Cyllell Meddyg**

**Botwm Rhyddhau**

**Cap (Clir) Man Prawf Arall**