



## ત્વરિત શરુઆત કરવાની માર્ગદર્શિકા

ગ્રાહક સંભાળ: 0800 093 1812

ઈમરજન્સીના કેસમાં તમારા આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાયી (પ્રોફેશનલ) કે ઈમરજન્સી તબીબી પ્રતિક્રિયાનો સંપર્ક સાધો.


એગામેટ્રિક્સ જાઝ બ્લડ ગ્લુકોઝ નિરીક્ષણ પદ્ધતિ (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Monitoring System) બધા લોકો સાથે તમારા ગ્લુકોઝના સ્તરો તપાસવાની તમને તક આપે છે.

### પાયાના પગલાં (સંપૂર્ણ સૂચનાઓ માટે, તમારી એગામેટ્રિક્સ જાઝ માલિકની માર્ગદર્શિકા (AgaMatrix JAZZ Owner's Guide) જુઓ)

#### 1 પરીક્ષણ પટ્ટી (સ્ટ્રીપ) મીટરમાં જવા દો:


પરીક્ષણ સ્ટ્રીપ પોર્ટમાં પરીક્ષણ પટ્ટીને એવી રીતે પ્રવેશવા દો જેથી કરીને તેના કોન્ટેક્ટ બાર્સ ઉપરની તરફ રહે. મીટર સક્રિય થઈ જશે.

સાવચેતી: ચોકસાઈપૂર્વકના પરિણામો સુનિશ્ચિત કરવા, તમારા હાથ ગરમ સાબુવાળા પાણીથી ધુવો અને પ્રત્યેક પરીક્ષણ પહેલા તેને સુકાં કરો.

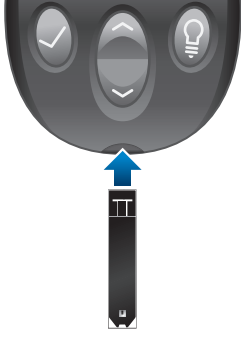

#### 2 લાંસ પરીક્ષણ સ્થળ:


પરીક્ષણ સ્થળની સામે લાંસ ઉપકરણને દબાવો અને રિલીઝ બટનને પણ દબાવો.

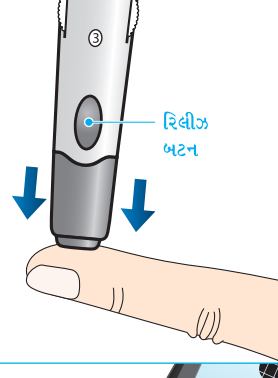

#### 3 પ્રગટ થતું લોહીનું ટીપુ:


દેખા દેતા લોહીના પ્રથમ ટીપાને એક સાફ ટીસ્કુ કે પેપર ટોવેલથી લુસી નાંખો.

લોહીનું બીજું નાનું ટીપુ નીકળે ત્યાં સુધી તમારી આંગળીને નીચેથી ઉપર તરફ દબાવતા રહો.

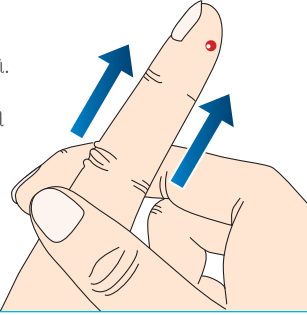

#### 4 પરીક્ષણ સ્ટ્રીપને લોહીના નમુનાના સંપર્કમાં લાવો:


એગામેટ્રિક્સ જાઝ પરીક્ષણ પટ્ટી (સ્ટ્રીપ) નમૂના દ્વારા લોહીને પરીક્ષણ પટ્ટીમાં લાવે છે.

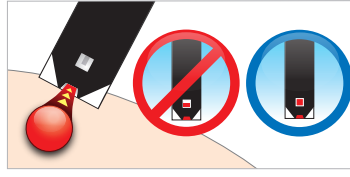

#### 5 મીટર સંકેત ધ્વનિ કરે ત્યારે પરીક્ષણ સ્ટ્રીપના અગ્ર ભાગ (ટિપ)ને રક્તથી હટાવી દો:




1-2-3 ની અવળી ગણતરી પછી (સ્ક્રીન પર સ્કોલિંગ બાર) તમારું પરિણામ પ્રદર્શનપટ પર દેખાશે.

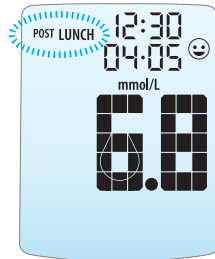

દરમિયાન મીલટાઈમ ટેગ જાબકરો. એનું સમર્થન મેળવવા ટીક બટન દબાવો, તેને બદલવા કે વધુ વિગતો માટે તમારી માલિકની માર્ગદર્શિકા જુઓ.

#### 6 સમાપ્તિ:

વપરાયેલી પરીક્ષણ સ્ટ્રીપ દૂર કરો. મિટર આપમેળે નિષ્ક્રિય થઈ જશે. લેસિંગ ઉપકરણના ડાંકણને ઝટકાથી કાઢી લો અને લેસેટ (શસ્ત્રવૈદ્યનું બે ધારિયું અણિયાળું શસ્ત્ર; માથે અણીવાળી કમાન અથવા બારી)ને દૂર કરો. વપરાયેલી પરીક્ષણ સ્ટ્રીપ અને લેસેટનો યોગ્ય નિકાલ કરો.

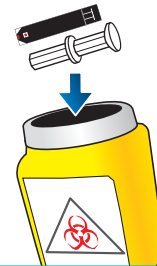


### લાંસિંગ પદ્ધતિ તૈયાર કરવી:

#### ચેતવણી:

એગામેટ્રિક્સ લાંસિંગ ઉપકરણ એક જ વ્યક્તિએ સ્વપરીક્ષણ માટે લોહીનો નમૂનો લેવા જ ફક્ત વાપરવું જોઈએ. અન્ય કોઈ વ્યક્તિએ ઉપયોગમાં લીધેલું કોઈ લાંસેટ કે લાંસિંગ ઉપકરણ ઉપયોગમાં લેશો નહીં.

#### 1 લાંસિંગ ઉપકરણ ડાંકણને ઝટકાથી અલગ કરો.

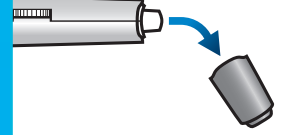

#### 2 લાંસેટ ધારક કપમાં નવું લાંસેટ દાખલ કરો.




#### 3 લાંસેટના ડાંકણને હટાવી દો.




#### 4 લાંસિંગ ઉપકરણનું ડાંકણું બદલો.



#### 5 લાંસિંગ લેવલ બેસાડો.

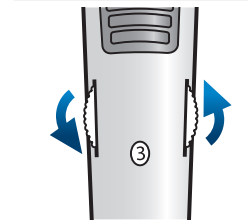


#### 6 કોલિંગ હેન્ડલને તે ક્લિકનો અવાજ કરે ત્યાં સુધી બહાર ખેંચો.

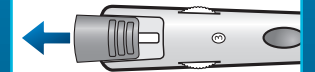

### એગામેટ્રિક્સ જાઝ બ્લડ ગ્લુકોઝ મિટર



### એગામેટ્રિક્સ જાઝ ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ

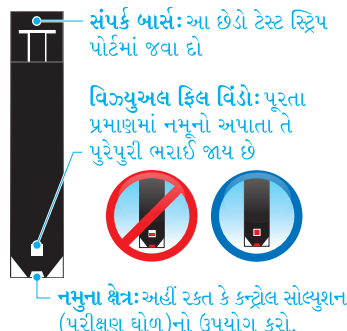

### એગામેટ્રિક્સ લાંસિંગ પદ્ધતિ

