



ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਗਾਈਡ

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ: 0800 093 1812

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਲਬਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਜੈਜ਼ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Monitoring System) ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ (ਪੂਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਜੈਜ਼ ਓਨਰ'ਸ ਗਾਈਡ (AgaMatrix JAZZ Owner's Guide) ਨੂੰ ਵੇਖੋ)

1 ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਉ:


ਕੋਨਟੈਕਟ ਬਾਰਜ਼ (ਸੰਪਰਕ ਧਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਪੋਰਟ (ਸਟਰਿਪ ਪਾਣ ਲਈ ਜਗਹ) ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਕੇ ਸੁਕਾਓ।



2 ਲੈਂਸ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ:


ਲੈਂਸਿੰਗ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਗਹ ਤੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ।

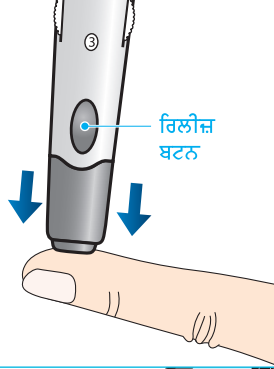

3 ਐਕਸਪੋਜ਼ ਬਲੱਡ ਡਰਾਪ:


ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਬਣੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ (ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ) ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਦਿਉ।

ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਪੱਟੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤਕ ਖੂਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।

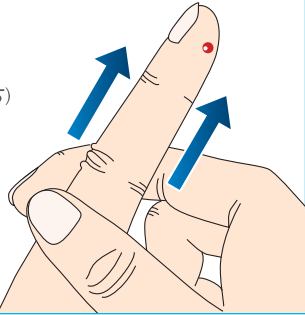

4 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਰਿਪ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਤਕ ਲਿਆਉ:


ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਜੈਜ਼ ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ (AgaMatrix JAZZ Test Strip) ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਰਿਪ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

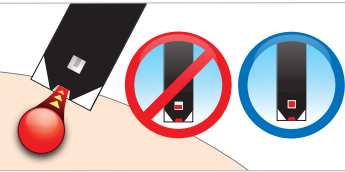

5 ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਉ:



1-2-3 ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ (ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਬਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰੀ ਦਿੱਸੇਗੀ) ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਸੇਗਾ।

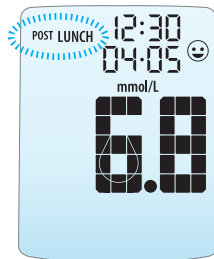

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਗ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ (ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ) ਦਿੱਸੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਕ (TICK) ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ। ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਓਨਰ'ਸ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ।

6 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ:

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਹਟਾ ਦਿਉ। ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ (ਸੂਈ ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ) ਦਾ ਢੱਕਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈਂਸੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਅਤੇ ਲੈਂਸੈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ।




ਲੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਚੇਤਾਵਨੀ:

ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਲੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਸੈਟ ਜਾਂ ਲੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ।

1 ਲੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ (ਯੰਤਰ) ਦਾ ਢੱਕਣ ਖਿੱਚੋ।

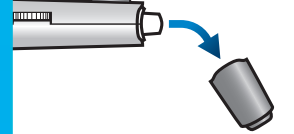

2 ਲੈਂਸੈਟ ਹੋਲਡਰ ਕੱਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਸੈਟ ਪਾਉ।




3 ਲੈਂਸੈਟ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਹੋ।



4 ਲੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਮੁੜ ਪਾ ਦਿਉ।



5 ਲੈਂਸਿੰਗ ਲੈਵਲ ਸੈਟ ਕਰੋ।

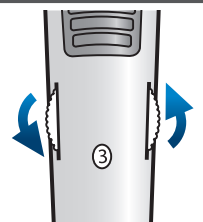

6 ਕੱਕਿੰਗ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਜਦ ਤਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੇ।



ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਜੈਜ਼ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੀਟਰ

ਡਿਸਪਲੇ (ਵਿਖਾਲਾ)

ਟਿੱਕ ਬਟਨ: ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਪ ਐਂਡ ਬਟਨ: ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਪੋਰਟ



ਬੈਕਲਾਈਟ ਬਟਨ: ਬੈਕਲਾਈਟ 'ਆਨ (ਚਾਲੂ)' ਅਤੇ 'ਆਫ (ਬੰਦ)' ਕਰਦਾ ਹੈ

ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਬਟਨ: ਅੱਗ ਵੱਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਜੈਜ਼ ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ

ਕੋਨਟੈਕਟ ਬਾਰਜ਼: ਇਸ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਟਰਿਪ ਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਉ

ਵਿਯੂਅਲ ਫਿਲ ਵਿੰਡੋ: ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸੈਂਪਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਸੈਂਪਲ ਏਰੀਆ: ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ਘੋਲ) ਲਗਾਉ


ਐਗਾਮੈਟਰਿਕਸ ਲੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਡੈਪਥ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਡਾਇਲ

ਡੈਪਥ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਿੰਡੋ

ਲੈਂਸੈਟ ਹੋਲਡਰ ਕੱਪ

ਲੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕੈਪ (ਢੱਕਣ)

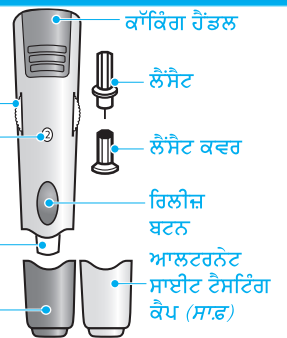

ਕੱਕਿੰਗ ਹੈਂਡਲ

ਲੈਂਸੈਟ

ਲੈਂਸੈਟ ਕਵਰ

ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ

ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਾਈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪ (ਸਾਫ)