



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

**Обслуживание покупателей: 0800 093 1812**

При возникновении экстренной ситуации обратитесь к врачу или в скорую помощь.

Система контроля глюкозы в крови AgaMatrix JAZZ позволяет проверять уровни глюкозы в образцах цельной крови.

### Основные шаги (Полную инструкцию см. в Руководстве Пользователя Agamatrix JAZZ)

#### 1 Вставьте тест-полоску в прибор:


Вставьте тест-полоску в порт контактами вверх. Прибор активируется.

*ОСТОРОЖНО: Чтобы гарантировать точные результаты, мойте руки теплой мыльной водой и тщательно вытирайте их перед каждым тестом.*



#### 2 Сделайте прокол на коже:


Прижмите прибор к коже на месте взятия анализа и нажмите на кнопку спуска.

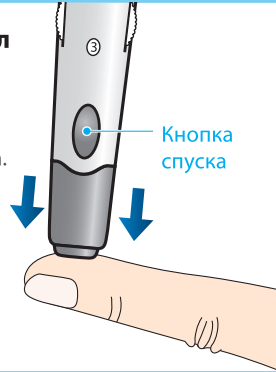

#### 3 Выдавите каплю крови:

Вытрите первую появившуюся каплю крови чистой тканью или салфеткой.

Сжимайте палец от основания к кончику, пока не появится вторая капля крови.

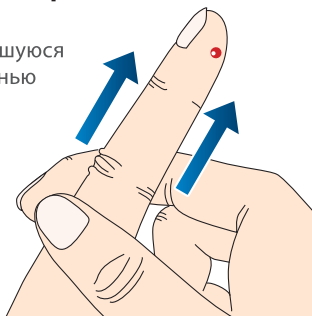


#### 4 Поднесите тест-полоску к образцу крови:

Тест-полоска AgaMatrix JAZZ забирает кровь из места прокола.



#### 5 После короткого сигнала уберите кончик тест-полоски от места прокола:

После обратного отсчета 1-2-3 (он отображается на экране) на дисплее появится результат.

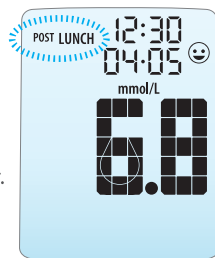

Начнет мигать значок с временем приема пищи. Чтобы подтвердить, нажмите на кнопку с ГАЛОЧКОЙ. Для внесения изменений или получения дополнительной информации см. руководство пользователя.



#### 6 Окончание:

Удалите использованную тест-полоску. Прибор автоматически деактивируется. Вытащите ланцетное устройство и удалите ланцет. Должным образом избавьтесь от использованных тест-полоски и ланцета.




### Подготовка ланцетного устройства

#### Предупреждение:

Ланцетное устройство AgaMatrix ДОЛЖНО использоваться ТОЛЬКО одним человеком для самостоятельной проверки. Не используйте ланцеты или ланцетные устройства, которые уже были использованы другими.

#### 1 Снимите крышку ланцетного устройства.

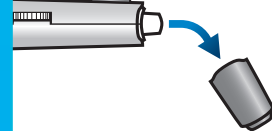


#### 2 Вставьте новый ланцет в держатель.





#### 3 Снимите крышку ланцета.



#### 4 Закройте ланцетное устройство крышкой.

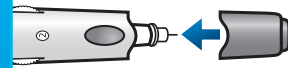

#### 5 Установите уровень прокола.

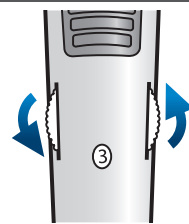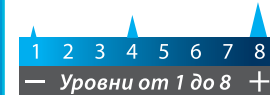

#### 6 Оттяните ручку взвода до щелчка.



### Прибор для измерения глюкозы в крови AgaMatrix JAZZ

Дисплей

**Кнопка с ГАЛОЧКОЙ:** для подтверждения или выбора в меню

**Кнопка ВВЕРХ:** прокручивает назад

**Порт для тест-полоски**



**Кнопка ПОДСВЕТКИ:** ВКЛЮЧАЕТ и ВЫКЛЮЧАЕТ подсветку

**Кнопка ВНИЗ:** прокручивает вперед

### Тест-полоска AgaMatrix JAZZ

**Контакты:** Вставляйте тест-полоску в порт этой стороной

**Окно визуализации заполнения:** полностью заполняется, когда в системе достаточно крови для анализа

**Участок взятия пробы:** сюда наносится кровь или контрольный раствор.



### Система прокола AgaMatrix

**Регулятор глубины**

**Индикатор глубины**

**Крышка держателя ланцета**

**Крышка ланцетного устройства**



**Ручка взвода**

**Ланцет**

**Колпачок ланцета**

**Кнопка спуска**

**Альтернативный колпачок (Прозрачный)**