



### দ্রুত শুরু করার নির্দেশিকা

গ্রাহক পরিষেবাঃ 0800 093 1812

জরুরী অবস্থায় আপনার পেশাদার স্বাস্থ্য পরিচালক বা জরুরী অবস্থার চিকিৎসা প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থায় যোগাযোগ করুন।

অ্যাগাম্যাট্রিক্স জাজ রক্তের গ্লুকোস স্তর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Monitoring System) সাহায্যে আপনি সম্পূর্ণ রক্তের গ্লুকোসের স্তর পরীক্ষা করতে পারেন।

প্রাথমিক পদক্ষেপ [সম্পূর্ণ নির্দেশাবলীর জন্য, আপনার অ্যাগাম্যাট্রিক্স জাজের মালিকের জন্য ওনার্স গাইড (AgaMatrix JAZZ Owner's Guide) দেখুন]

#### 1 মিটারে টেস্ট স্ট্রিপ ঢুকিয়ে নিঃ

টেস্ট স্ট্রিপের কনট্যাক্ট বার অর্থাৎ যুক্ত করার অংশটি উপরদিকে রেখে তা টেস্ট স্ট্রিপ পোর্টে ঢুকিয়ে দিন। মিটার চলতে শুরু করবে।

সাবধানঃ নির্ভুল পরিণাম সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি টেস্টের আগে উষ্ণ সাবানজল দিয়ে আপনার হাত ধুয়ে শুকিয়ে নেন।



#### 2 লাস টেস্টের স্থানঃ


লাস করার যন্ত্রটি টেস্টের স্থানটিতে রেখে টিপে দিন ও রিলীজ বোতাম টিপুন।



#### 3 চাপ দিয়ে রক্তবিন্দু বার করুনঃ


প্রথম যে রক্তবিন্দু বেরিয়ে আসবে তা পরিষ্কার টিস্যু বা কাগজের তোওয়ালে দিয়ে মুছে ফেলুন।

আপনার আঙ্গুলের গোড়া থেকে ডগার দিকে চাপতে থাকুন যতক্ষণ না দ্বিতীয় ছোট একবিন্দু রক্ত পাওয়া যায়।

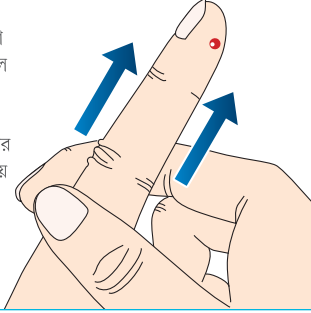

#### 4 টেস্ট স্ট্রিপ রক্তের ঐ নমুনার কাছে নিয়ে আসুনঃ


অ্যাগাম্যাট্রিক্স জাজ টেস্ট স্ট্রিপ নমুনার স্থানটির মধ্যে দিয়ে টেস্ট স্ট্রিপে রক্তবিন্দু টেনে নেবে।

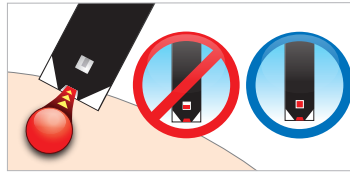

#### 5 মিটারে বীপ শব্দ শোনার পর, রক্ত থেকে টেস্ট স্ট্রিপের ডগা সরিয়ে নিঃ



(স্ক্রিনে স্ক্রলিং বার-এ) 1-2-3 উল্টো গোণার পর, আপনার পরিণাম ডিসপ্লেতে ফুটে উঠবে।

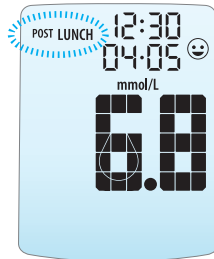

আহারের সময়ের মীলটাইম ট্যাগ ফ্ল্যাশ হতে থাকবে। এটি সুনিশ্চিত করতে টিক বোতাম টিপে দিন। এটা বদলানোর জন্য বা আরো বিবরণের জন্য আপনার ওনার্স গাইড দেখুন।

#### 6 শেষ করাঃ

ব্যবহার করা টেস্ট স্ট্রিপ সরিয়ে ফেলুন। মিটার নিজ থেকে কাজ করা বন্ধ করে দেবে। ল্যাস করার যন্ত্রের ঢাকনা এক বাটকায় খুলে ফেলুন ও ল্যাসেট (শল্যচিকিৎসার দু দিক ধারণা ছুরি) সরিয়ে নিন। ব্যবহৃত টেস্ট স্ট্রিপ ও ল্যাসেট যথাযথ উপায়ে ফেলে দিন।




### ল্যাস করার প্রণালী তৈরী করা

#### সতর্কীকরণঃ

একজন মাত্র ব্যক্তির নিজের রক্ত পরীক্ষা করার জন্য একটি রক্তের স্যাম্পেল নিতে অ্যাগাম্যাট্রিক্স ল্যাসিং যন্ত্রটি ব্যবহার করা উচিত। অন্য কোন ব্যক্তির ব্যবহৃত ল্যাসেট বা ল্যাসিং যন্ত্র আপনি কখনই ব্যবহার করবেন না।

#### 1 ল্যাসিং যন্ত্রটির ঢাকনা এক বাটকায় খুলে ফেলুন।

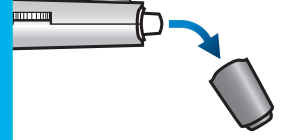


#### 2 ল্যাসেট ধারক ঢাকনায় একটা নতুন ল্যাসেট ঢুকিয়ে দিন।




#### 3 ল্যাসেটের ঢাকনা টেনে খুলে নিন।



#### 4 ল্যাস করার যন্ত্রের ঢাকনা আবার লাগিয়ে নিন।

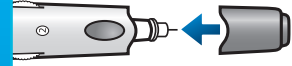

#### 5 ল্যাস করার স্তর সেট করুন।

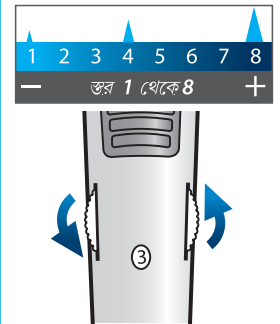

#### 6 ককিং হ্যান্ডেল বাইরের দিকে টানতে থাকুন যতক্ষণ না ক্লিক শব্দ হয়।



### অ্যাগাম্যাট্রিক্স জাজ রক্তের গ্লুকোস মিটার

ডিসপ্লে

টিক বোতামঃ

সুনিশ্চিত করুন বা মেনু থেকে বেছে নিন

আপ অ্যারো বোতামঃ

পিছনদিকে স্ক্রোল করে টেস্ট স্ট্রিপের পোর্ট




ব্যাঙ্কলাইট বোতামঃ ব্য্যাঙ্কলাইট চালু ও বন্ধ করে

ডাউন অ্যারো বোতামঃ সামনের দিকে স্ক্রোল করে

### অ্যাগাম্যাট্রিক্স জাজ টেস্ট স্ট্রিপ

কনট্যাক্ট বারঃ এই প্রান্তটি টেস্ট স্ট্রিপের পোর্টে ঢুকিয়ে দিন

ভিজুয়াল ফিল উইন্ডোঃ পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যাম্পেল রাখা হলে সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে যায়

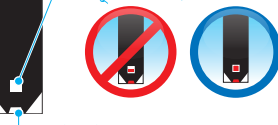

স্যাম্পেল ক্ষেত্রঃ এখানে রক্ত বা কন্ট্রোল সলিউশন প্রয়োগ করুন।

### অ্যাগাম্যাট্রিক্স ল্যাস করার ব্যবস্থা


গভীরতা

বিন্যস্ত করার ডায়াল

গভীরতা দেখানোর উইন্ডো

ল্যাসেট ধারকের ঢাকনা

ল্যাস করার যন্ত্রের ঢাকনা

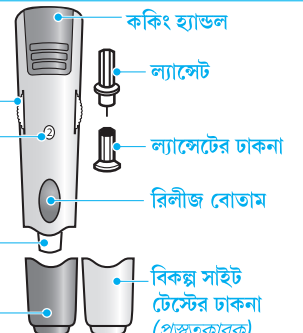

ককিং হ্যান্ডেল

ল্যাসেট

ল্যাসেটের ঢাকনা

রিলীজ বোতাম

বিকল্প সাইট

টেস্টের ঢাকনা

(প্রস্তুতকারক)