



کوئک اسٹارٹ گائڈ

نگہداشت صارفین: 0800 093 1812

ہنگامی صورت حال میں اپنے نگہداشت صحت کے ماہر یا ہنگامی طبی سہولت گاہ سے رابطہ کریں۔

آگامیٹرکس جاز بلڈ گلوکوز مانیتورنگ سسٹم (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Monitoring System) آپ کے مکمل خون کے گلوکوز کی سطح کی جانچ میں مدد کرتا ہے۔

سوراخ کرنے والے نظام کی تیاری

انتباہ:

آگامیٹرکس (AgaMatrix) سوراخ کرنے والا آلہ صرف ایک ہی فرد کو خود اپنی جانچ کرنے اور صرف نمونہ خون حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی سوئی یا سوراخ کرنے کا آلہ استعمال نہ کریں جو کسی دوسرے شخص نے استعمال کیا ہو۔

بنیادی مراحل [مکمل ہدایات کے لیے اپنا آگامیٹرکس جاز کا ہدایت نامہ صارفین (AgaMatrix JAZZ Owner's Guide)] دیکھیں

1 جانچ پٹی کو میٹر میں داخل کریں:

رابطہ ہاروں کا رخ اوپر رکھتے ہوئے جانچ پٹی کو جانچ پٹی پورٹ میں داخل کریں۔ میٹر فعال ہو جائے گا۔

احتیاط: درست نتائج کی یقین دہانی کے لیے ہر جانچ سے پہلے اپنے ہاتھوں کو نیم گرم، صابن کے پانی سے دھوئیں اور خشک کریں۔

2 جانچ کرنے کے مقام پر سوراخ کریں

سوراخ کرنے والے آلے (جراحی نشتر) کو جانچ کے مقام کے مقابل دبائیں اور رلیز بٹن کو دبائیں

3 خون کا قطرہ نکالیں:

ظاہر ہونے والے خون کے پہلے قطرے کو صاف ٹشو یا کاغذی تولیے سے صاف کر دیں۔

اپنی انگلی کو نیچے کی طرف سے سرے کی طرف دبانا شروع کریں یہاں تک کہ خون کا دوسرا قطرہ بن جائے۔

4 جانچ پٹی کو نمونہ خون کے پاس لائیں:

آگامیٹرکس جاز (AgaMatrix JAZZ) جانچ پٹی خون کو جانچ پٹی میں نمونہ کے علاقے سے ہو کر کھینچتا ہے۔

5 جب میٹر میں اشاراتی آواز ہوتی ہے تو خون سے جانچ پٹی کے سرے کو ہٹا دیں:

1-2-3 کی الٹی گنتی کے بعد (اسکرین پر بار کا اوپر نیچے ہونا) آپ کا نتیجہ پردے پر ظاہر ہوتا ہے۔

6 اختتام:

استعمال شدہ جانچ پٹی کو ہٹائیں۔ پیمانہ خودکار طور پر غیر فعال ہو جائے گا۔ سوراخ کرنے کے آلے کا ڈھکن کھول کر سوئی (جراحی نشتر) ہٹا دیں۔ استعمال شدہ جانچ پٹی اور سوئی کو ٹھیک طرح ضائع کر دیں۔

1

سوراخ کرنے والے آلے کا ڈھکن اتار دیں۔

2

سوئی گیر کپ میں نئی سوئی داخل کریں۔

3

سوراخ کرنے والے آلے کے ڈھکن کو اتار دیں۔

4

سوراخ کرنے والے آلے کا ڈھکن دوبارہ لگا دیں۔

5

سوراخ کرنے کی سطح مقرر کریں۔


6

کھڑکے کی آواز ہونے تک کاکنگ بینڈل کو باہر کھینچیں۔

آگامیٹرکس جاز بلڈ گلوکوز میٹر (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Meter)



آگامیٹرکس جاز (AgaMatrix JAZZ) جانچ پٹی

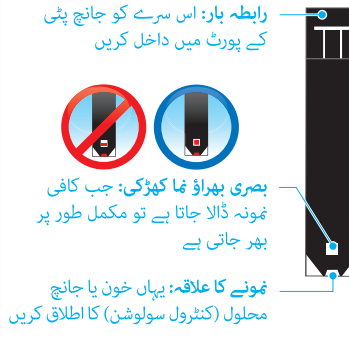

آگامیٹرکس لانسنگ سسٹم (AgaMatrix Lancing System)

