



GDm-Health ਐਪ Apple App Store (iPhone) ਅਤੇ Google Play (Android ਫੋਨਾਂ) ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ www.sensynehealth.com/gdm

Google Play ਜਾਂ App Store ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ



ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, GDm-Health ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਪਾਸਵੋਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।

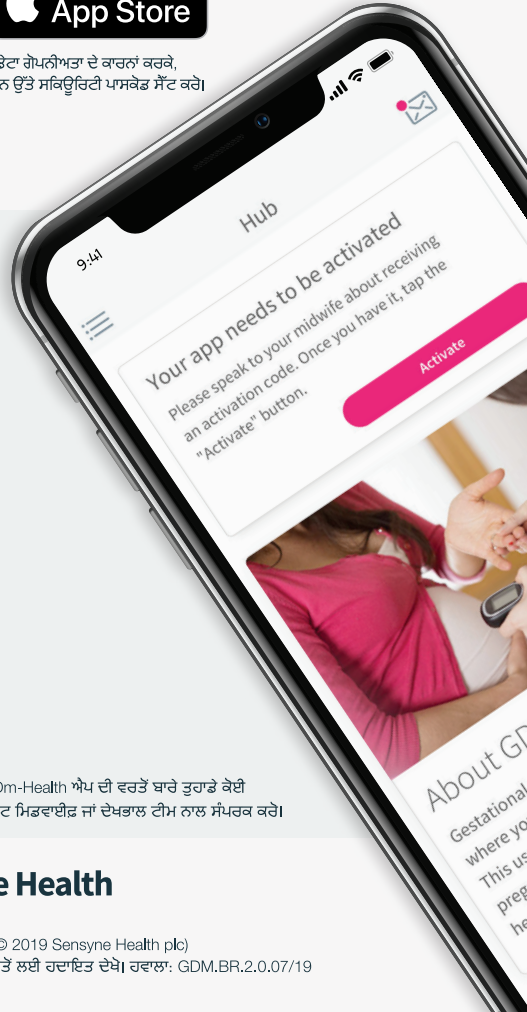

- 1 ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ, 'Activate (ਐਕਟੀਵੇਟ)' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 9-ਅੰਕੀ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ
- 2 'Terms of use(ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ)' ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ 'I agree (ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ)' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ

ਜੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾਂ (ਗਲਿਸੇਮਿਕ) ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ GDm-Health ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮਿਡਵਾਈਫ਼ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



WaveSense JAZZ WIRELESS ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੀਟਰ ਨੂੰ GDm-Health ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ



**AgaMatrix WaveSense JAZZ WIRELESS ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਮਾਰਟ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:**

1. GDm-Health ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'Hub (ਹੱਬ)' ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ "connect to a meter (ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ)" ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
2. 'Choose meter (ਮੀਟਰ ਚੁਣੋ)' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ WaveSense JAZZ WIRELESS ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣੇ WaveSense JAZZ WIRELESS ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ Bluetooth ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਗਮਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ "Scan now (ਹੁਣ ਸਕੈਨ ਕਰੋ)" ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
4. ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
5. ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ 6-ਅੰਕ ਦਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ; ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਐਪ ਲਈ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ:

1. GDm-Health ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'Hub (ਹੱਬ)' ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ **+** ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
2. 'Take a BG reading (ਬੀ.ਜੀ. ਪੜ੍ਹਤ ਲਵੋ)' ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3. ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਉੱਤੇ 'Scan (ਸਕੈਨ)' ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

7500-10223-PA Rev B | Punjabi