



Miễn phí tải xuống ứng dụng GDM-Health từ Apple App Store (iPhone) và Google Play (điện thoại Android).

Bạn có thể dễ dàng tải ứng dụng này xuống bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:

Trên điện thoại, hãy truy cập www.sensynehealth.com/gdm

Nhấn vào biểu tượng Google Play hoặc App Store và cài đặt



Lưu ý: Xin lưu ý rằng, vì lý do bảo mật dữ liệu, GDM-Health yêu cầu bạn đặt mật khẩu bảo mật trên điện thoại.


- 1 Mở ứng dụng, nhấn vào 'Activate (Kích hoạt)' và gửi mã gồm 9 chữ số mà nhóm chăm sóc bệnh tiểu đường đã cung cấp cho bạn
- 2 Đọc và đồng ý với 'Terms of use (Điều khoản sử dụng)' bằng cách nhấn vào 'I agree (Tôi đồng ý)'

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đo lường đường huyết hoặc sử dụng ứng dụng GDM-Health, vui lòng liên hệ với Y tá hoặc nhóm chăm sóc Chuyên khoa Tiểu đường của bạn.

 **Sensyne Health**

© 2019 Sensyne Health plc

Bảo lưu mọi quyền. Thông tin công khai. Theo hợp đồng. Tham khảo hướng dẫn sử dụng. Tham chiếu GDM.BR.2.0.07/19

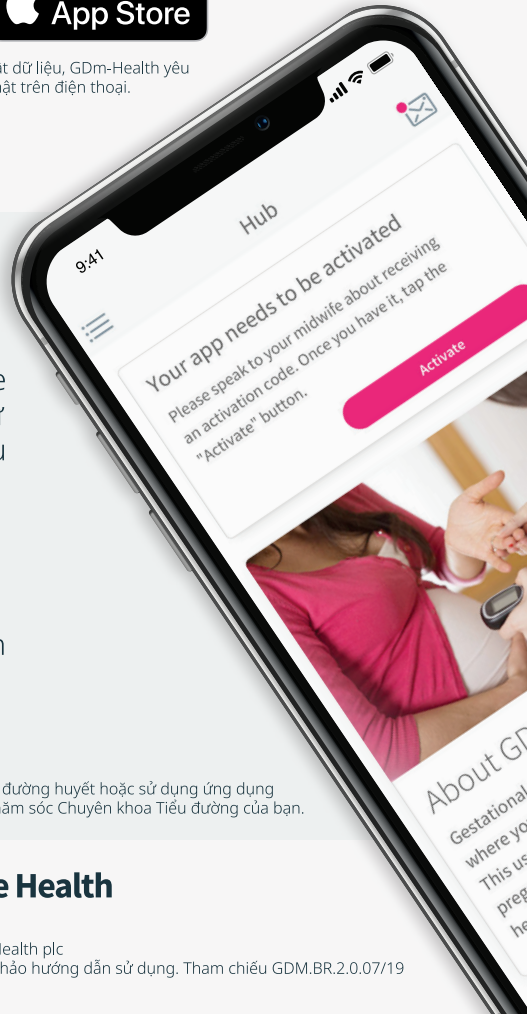

Kết nối máy đo đường huyết WaveSense JAZZ WIRELESS với ứng dụng GDM-Health



Bạn có thể dễ dàng ghép nối máy AgaMatrix WaveSense JAZZ WIRELESS với thiết bị thông minh của mình bằng cách làm theo hướng dẫn sau:

1. Mở ứng dụng GDM-Health và chuyển đến màn hình 'Hub (Trung tâm)', sau đó nhấn vào 'connect to a meter (kết nối với máy đo)'
2. Nhấn vào máy đo WaveSense JAZZ WIRELESS trong danh sách 'Choose meter (Chọn máy đo)'
3. Nhấn và giữ nút trên máy đo WaveSense JAZZ WIRELESS cho đến khi biểu tượng Bluetooth bắt đầu nhấp nháy, sau đó hãy nhấn vào nút 'Scan now (Quét ngay)'
4. Máy đo và số sê-ri của máy đo sẽ xuất hiện trong danh sách máy đo của bạn, hãy nhấn vào số sê-ri đó để bắt đầu ghép nối
5. Khi được nhắc, hãy nhập mã gồm 6 chữ số hiển thị trên máy đo vào ứng dụng; một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện sau khi máy đo được ghép nối thành công

Để đồng bộ hóa kết quả đo đường huyết từ máy đo với ứng dụng, bạn chỉ cần làm như sau:

1. Mở ứng dụng GDM-Health và chuyển đến màn hình 'Hub (Trung tâm)', sau đó nhấn vào biểu tượng dấu + lớn ở dưới cùng bên phải màn hình
2. Nhấn vào 'Take a BG reading (Lấy kết quả đường huyết)'
3. Nhấn rồi nhả nút trên máy đo và nhấn vào 'Scan (Quét)' trên ứng dụng để đồng bộ hóa kết quả gần đây

7500-10223-VI Rev B | Vietnamese