


تبادلہ بیٹریاں شامل ہیں!

آپ کے میٹر کے سفری خول میں دو تبدیلی CR2032،  
3-ولٹ کی لیتھیئم بیٹریاں شامل ہیں۔ بیٹری بدلنے کی ہدایت  
پشت کی طرف دیکھیں۔

سوراخ کرنے کا نظام:

- 1) کوکنگ بینڈل
- 2) گہرائی ظاہر کرنے والی کھڑکی
- 3) گہرائی
- 4) ریلیز بٹن
- 5) سوئی کو باہر نکالنے والا پزہ
- 6) سوراخ کرنے والے آلے کا ڈھانچہ
- 7) سوئی کا ہولڈر
- 8) سوئی گیر ٹوپی
- 9) متبادل مقام کی جانچ کی ٹوپی (شفاف)
- 10) سوئی
- 11) سوئی کا ڈھکن

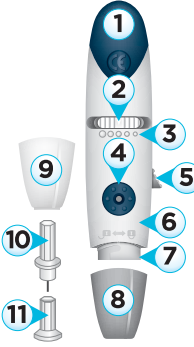

جانچ پنی

- 1) رابطہ باز  
اس سرے کو جانچ پنی پورٹ  
میں داخل کریں
- 2) وژیول فل کھڑکی:  
جب کافی نمونہ ڈالا جاتا ہے  
تو پوری طرح بھر جاتی ہے
- 3) نمونے کا ایریا:  
خون یا کنٹرول محلول یہاں  
لگایا جاتا ہے



بلڈ گلوکوز میٹر

- 1) ڈسپلے ایریا
- 2) جانچ پنی پورٹ
- 3) میٹر بٹن:  
میٹر کو چالو کرنے کے  
لیے دبائیں اور گلوکوز کی پچھلی جانچ  
کے نتائج دیکھیں۔



سسٹم کے بارے میں

آگامیٹرکس ویوسنس جاز وائریس بلڈ گلوکوز  
مانیٹرنگ سسٹم مہین شریانوں میں بہتے  
مکمل خون میں گلوکوز کی سطحوں کی جانچ  
میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مکمل ہدایات  
کے لیے اپنا ہدایت نامہ صارفین آگامیٹرکس  
ویوسنس جاز وائریس دیکھیں۔

انتباہ: آگامیٹرکس سوراخ کرنے والا آلہ صرف ایک  
بسی شخص کو خود اپنی جانچ کے لیے نمونہ خون  
لینے کی غرض سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی  
کوئی سوئی یا سوراخ کرنے والا آلہ استعمال نہ کریں  
جو کسی دوسرے شخص نے استعمال کیا ہو۔

وضاحت: جانچ کرنے سے پہلے آپ کو میٹر کا وقت اور تاریخ سیٹ کرنے کے لیے آگامیٹرکس ڈائی ہنیز مینیجر ایپ (ایپ) کے ساتھ اپنے میٹر کی وقتی مطابقت کرنی چاہیے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ میٹر سے  
حاصل نتائج ایپ میں تارکے بغیر ارسال کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس فوری اسٹارٹ ہدایت نامہ کی پشت پر دیکھیں یا اپنا ہدایت نامہ صارفین دیکھیں۔

سوراخ کرنے والے نظام کی تیاری

1 سوراخ کرنے والے آلے کی  
ٹوپی گھما کر اسے کھولیں۔



2 سوئی کے ہولڈر میں نئی سوئی  
داخل کریں۔ سوئی کو مزید باہر  
نکالنے کے لیے ریلیز بٹن دبائیں۔



3 سوئی کو پکڑ کر اس کے  
ڈھکن کو گھما کر بنائیں۔



4 سوراخ کرنے والے آلے کی  
ٹوپی دوبارہ لگائیں۔



5 جلد میں داخل ہونے کی  
گہرائی مقرر کریں۔



6 کوکنگ بینڈل کو کھٹکے کی آواز  
ہونے پر باہر کی طرف کھینچیں۔




بلڈ گلوکوز کی جانچ کے مراحل

(مکمل ہدایات کے لیے اپنا ہدایت نامہ صارفین برائے آگامیٹرکس ویوسنس جاز وائریس دیکھیں)

1 جانچ پنی کو  
میٹر میں داخل کریں:

رابطہ باروں کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے  
جانچ پنی کو جانچ پنی پورٹ میں داخل کریں۔  
میٹر خودکار طور پر فعال ہوجائے گا۔

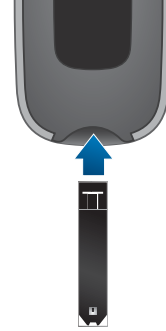

2 جانچ کے مقام پر سوراخ کریں:

سوراخ کرنے کا آلہ تیار کرنے کا طریقہ جاننے  
کے لیے دابنے طرف دی گئی ہدایات دیکھیں۔



جس مقام پر سوراخ کرنا ہے سوراخ کرنے  
والے آلے کو اس کے مقابل دبائیں اور ریلیز  
بٹن دبائیں۔

انتباہ: بالکل درست نتائج کو یقینی بنانے کے لیے  
ہر جانچ سے پہلے اپنے ہاتھ نیم گرم صابن کے  
پانی سے دھوئیں اور اچھی طرح خشک کر لیں۔

4 جانچ پنی کو نمونہ خون  
کے پاس لائیں:


میٹر پر، جانچ پنی پر خون کا نمونہ لگائیں، متحرک  
دکھاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خون لگانے  
جانے کے لیے تیار ہے۔



جانچ پنی نمونے کے مقام سے  
خون کو جانچ پنی میں کھینچ  
لیتی ہے۔

3 خون کا ایک قطرہ حاصل کریں:

اپنی انگلی کو نیچے سے اوپر کی طرف  
نچوڑتے ہوئے دبائیں، یہاں تک کہ خون کا  
ایک مختصر سا قطرہ آجائے۔

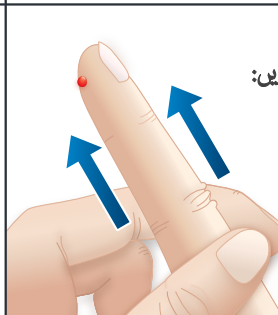

سوراخ کیے گئے مقام کے اطراف  
میں براہ راست نہ دبائیں۔

5 جب جانچ پنی کی وژیول فل کھڑکی پوری طرح سرخ  
ہوجائے اور میٹر بیپ دے تو خون کے نمونے سے  
الگ کریں:

میٹر کے اسکرین پر نمونہ لگانے جانے کی علامت  
ظاہر ہوگی اور آپ کو نمونہ خون سے جانچ پنی کب  
بنانی ہے، میٹر اس کی بیپ کرے گا۔



پوری وژیول فل کھڑکی  
سرخ ہوجائے گی۔

جانچ کے نتیجے کے حساب لگانے کے دوران میٹر  
کے ڈسپلے پر جانچ کے نتیجے نظر آئیں گے۔



جانچ کے متحرک نتائج پر نظر رکھیں۔ جانچ  
کا نتیجہ میٹر ڈسپلے پر ظاہر ہوگا۔ جانچ  
کا نتیجہ میٹر کی یادداشت میں محفوظ  
ہوجاتا ہے۔

استعمال شدہ جانچ پنی کو میٹر سے الگ  
کردیں۔ میٹر خودکار طور پر بند ہوجائے گا۔


سوئی گیر ٹوپی کو الگ کر دیں اور سوئی  
کا ڈھکن دوبارہ لگا دیں۔ استعمال شدہ  
سوئی بنا دیں۔



استعمال شدہ جانچ پنی اور سوئی کو  
مناسب طور پر ضائع کر دیں۔ اسے ضائع  
کرنے کے لیے اپنے نگہداشت صحت کے  
ماہر کی ہدایات پر عمل کریں۔

# فوری اسٹارٹ ہدایت نامہ

آگامیٹرکس ویوسنس جاز (AgaMatrix WaveSense) واٹرلیس بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم (JAZZ™)

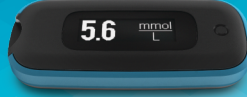

Bluetooth® واٹرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے  
ایپ سے خود کار طور پر وقتی مطابقت پیدا کر لیتا ہے۔

وضاحت: جانچ کرنے سے پہلے آپ کو میٹر کا وقت اور تاریخ سیٹ کرنے کے لیے آگامیٹرکس ڈاٹا بنیٹز مینیجر ایپ (ایپ) کے ساتھ اپنے میٹر کی وقتی مطابقت کرنی چاہیے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ میٹر سے حاصل ننانچ ایپ میں تار کے بغیر ارسال کیے جارہے ہیں۔

## جوڑا بندی اور وقتی مطابقت سے متعلق ہدایات

آگامیٹرکس ڈاٹا بنیٹز مینیجر ایپ کئی طرح کے iOS اور Android™ آلات پر کام کرتا ہے۔  
تجدید شدہ فہرست کے لیے [www.agamatrix.co.uk](http://www.agamatrix.co.uk) دیکھیں۔

### ایپ کے ساتھ اپنے میٹر کی جوڑا بندی اور وقتی مطابقت انجام دینا


گلوکوز کے نتائج کی براہ راست اپنے iOS یا اینڈرائڈ آلے سے براہ راست زمانی مطابقت کے لیے آگامیٹرکس ویوسنس جاز واٹرلیس میٹر کی آگامیٹرکس ڈاٹا بنیٹز مینیجر ایپ (ایپ) کے ساتھ استعمال کریں۔

جانچ کرنے سے پہلے اپنے میٹر کا وقت اور تاریخ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے میٹر کی زمانی مطابقت آگامیٹرکس ڈاٹا بنیٹز مینیجر ایپ (ایپ) سے کرنی چاہیے۔ مقررہ تاریخ اور وقت کے بغیر جانچ کے نتائج وقت اور تاریخ کی جگہ "----" اور "--/--" کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔

### 1 ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور کھولیں:

آگامیٹرکس ڈاٹا بنیٹز مینیجر ایپ (ایپ) App Store™ (اپل آلات کے لیے) یا Google Play™ (اینڈرائڈ آلات کے لیے) ڈاؤن لوڈ کریں۔

اپنے معاونتی آلے پر ایپ کے آئکن پر تھپتھپائیں۔

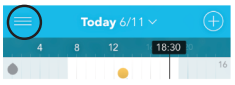

### 2 مینو آئکن پر جائیں:

تین سطروں سے بنے آئکن پر تھپتھپائیں۔

### 3 نئے میٹر کا اضافہ کریں:

"میٹرز" پر تھپتھپائیں۔ "نئے میٹر کا اضافہ کریں" پر تھپتھپائیں۔

اپنے میٹر پر، میٹر بنیٹ کو دبا کر رکھیں۔  
ایپ میں ظاہر ہونے پر اپنے میٹر کا انتخاب کریں۔

### 4 رمزی کلید (پاس کی) داخل کریں:

رمزی کلید کی مثال:



6-ہندسہ والا رمزی کلید میٹر پر ظاہر ہوگا۔

ایپ میں رمزی کلید نمبر کو داخل کریں۔

### 5 جوڑا بندی کی تصدیق کامیاب ہے:

صحیح کے نشان کی مثال:



میٹر اور ایپ دونوں یہ اشارہ دیں گے کہ جوڑا بندی کامیاب تھی۔ میٹر میں صحیح کا نشان آنے کا اور ایپ پر ایک پیغام ظاہر ہوگا۔

### 6 معلومات کی وقتی مطابقت:

آپ کے میٹر کی آلے کے ساتھ جوڑا بندی کے بعد آپ کے جوڑا بند آلے کے قریبی رابطے میں ہر بار آنے پر اس کی "وقتی مطابقت" ہوگی یا معلومات کی منتقلی ہوگی۔



10 میٹر

وضاحت: معلومات کی جوڑا بندی اور منتقلی کے لیے میٹر اور ایپ کو ایک دوسرے سے 10 میٹر کی دوری پر ہونا چاہیے۔

## بیٹری تبدیل کرنے سے متعلق ہدایات

ضروری: آگامیٹرکس ویوسنس جاز واٹرلیس میٹر کے ساتھ صرف CR2032 یا DL2032 بیٹریاں استعمال کریں۔

### بیٹری ڈسپلے پیغامات

**کم بیٹری کا پیغام:** (یہ پیغام 2 سیکنڈ کے لیے ظاہر ہوتا ہے) کم بیٹری کا پیغام دیکھنے پر بھی آپ کوئی جانچ انجام دے سکتے ہیں لیکن بیٹریاں جلد از جلد بدل دی جانی چاہئیں۔ صرف CR2032 یا DL2032 بیٹریاں ہی استعمال کریں۔



**بیٹری ناکارہ ہونے کا پیغام:** آپ کے میٹر کی بیٹریوں میں آپ کے میٹر کو چالو کرنے اور جانچ انجام دینے کی کافی طاقت نہیں ہے۔ بیٹریوں کو لازماً تبدیل کیا جانا چاہیے۔



### بیٹریوں کی تبدیلی: (مزید تفصیلات کے لیے اپنا آگامیٹرکس ویوسنس جاز واٹرلیس کا ہدایت نامہ صارفین دیکھیں)۔

ضروری: جب بیٹریاں تبدیل کی جارہی ہوں تو آپ کے میٹر سے تاریخ اور وقت مٹ جائیں گے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی جانچوں کی ریڈنگز میں تاریخ اور وقت شامل ہیں، آپ کو اپنے میٹر کی وقتی مطابقت معاونتی آلے سے کرنی چاہیے۔ اپنے میٹر کی وقتی مطابقت انجام دینے کے لیے دائیں جانب دی گئی ہدایات دیکھیں۔

وضاحت: بیٹریاں بنانے سے گلوکوز کے جمع شدہ نتائج کے ریکارڈ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔


### 1 بیٹری کا دروازہ کھولیں:

یہ یقینی بنائیں کہ میٹر بند ہے۔ بیٹری کے دروازے کو دیکھتے ہوئے میٹر کو گھمائیں۔ بیٹری کے دروازے کو میٹر سے کھسکا کر ہٹا دیں۔



### 2 استعمال شدہ بیٹریوں کو نکال دیں:

کسی غیر دھاتی اوزار سے استعمال شدہ بیٹریاں باہر نکال دیں۔

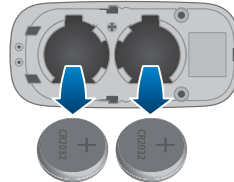


استعمال شدہ بیٹریاں

### 3 نئی بیٹریاں لگائیں:

آپ کے میٹر کے سفری خول میں بدلی جانے والی دو بیٹریاں شامل ہیں۔ بدلی جانے والی بیٹریوں کی جگہ دیکھ لیں۔

اپنے سامنے کی طرف جمع (+) کی علامت والی نئی بیٹریاں لگائیں۔

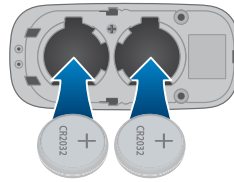

نئی بیٹریاں

### 4 بیٹری کا دروازہ بند کریں:

بیٹری کے دروازے کو میٹر کی طرف کھسکائیں۔ یہ یقینی بنائیں کہ میٹر استعمال کرنے سے پہلے بیٹری کا دروازہ پوری طرح بند ہے۔

براہ کرم استعمال شدہ بیٹریوں کو اپنے مقامی ماحولیاتی ضابطوں کے مطابق تلف کریں۔



0123 AgaMatrix, Inc. 7C Raymond Ave Salem, NH 03079 USA



MDS5 GmbH, Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany

Bluetooth® لفظ نشان اور علامات SIG, Inc. کی ملکیت ہیں اور AgaMatrix, Inc. میں ان علامات کا کوئی استعمال لائسنس کے تحت ہے۔ دیگر ٹریڈ مارک اور تجارتی نام ان کے متعلقہ مالکان کے ہیں۔ Apple Inc. اور ایپل علامات، Apple Inc. کے ٹریڈ مارک ہیں جو یو ایس اور دیگر ممالک میں رجسٹرڈ ہیں۔ Apple Inc. App Store کا نشان ہے۔ Android، Google Inc. کا ٹریڈ مارک ہے۔ Google Play، Google Inc. کا ٹریڈ مارک ہے۔